DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Dr Müller Dental Bleaching Set

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

TANIM

Ofis Tipi Bleaching set, yalnızca muayenehanede tıbbi kullanıma yönelik bir beyazlatma jelidir. Malzeme, diş hekimi tarafından tek tek dişleri beyazlatmak için kullanılır. Ofis Tipi Bleaching set endodontik tedavi görmüş dişler de dahil olmak üzere devital dişleri beyazlatmak için idealdir. 4:1 otomatik karışımlı şırınga (kartuş) beyazlatma jeli ve aktivatör içerir. Bir çift şırınga 5 g malzeme içerir. Hazır karışımlı jelin hidrojen peroksit içeriği %35'tir

PERFORMANS ÖZELLIKLERI

® Diş rengini Vita Shade Guide ile karşılaştırarak belirleyin.
Renkleri değerlendirmek için lütfen Vita ®
Shade Guide'a aşağıdaki şekilde başvurun.
Değerler renk tonuna göre sıralanmıştır:
A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Parlaklık değerine göre sıralanmıştır:
B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D3 A3 D4 B3 A3,5 B4 C3 A4 C4
B2-B1 = Değerler iki katına çıkarılmıştır
A3- A2 = Değerler dört katına çıkarılmıştır



PACKAGING

+REF **DRM/G/437166**	Dental bleaching gel 5g syringe
+REF **DRM/G/437167**	Post care gel 1,5g syringe
+REF **DRM/G/237145**	Gingiva barrier 2ml syringe

ENDİKASYONLAR

- Renk değiştirmiş, devital dişlerin beyazlatılması
- Hastalık, yaralanma veya iatrojenik olarak oluşan renk değiştirmiş dişlerin, kuron veya kaplamaya alternatif olarak beyazlatılması
- Reçeteli ilaçların (örn. tetrasiklin) neden olduğu diş renk bozulmalarının tedavisi

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

Kaiser Bulk Fill Composite

TANIM

Kaiser Bulk Fill Composite, posterior restorasyonlar, doğrudan dolgu ve "bulk fill" tekniği için ışıkla kürlenen, akışkan, yüksek radyoopak (%210 Al) bir kompozittir. Kaiser Bulk Fill Composite, şırınga ve kompüllerde mevcuttur. Komüller tek kullanımlıktır. Lütfen bunları tekrar kullanmayın, çünkü bu, kontaminasyonu ve mikrop oluşumunu ortadan kaldırmayı imkansız hale getirir. Ürün, DIN EN ISO 4049 kılavuzuna uygundur.

İÇERİK

Cam tozu, diüretan dimetakrilat, tetrametilen dimetakrilat, silisyum dioksit
Toplam dolgu: %77 ağırlıkça (%57 hacimce) inorganik dolgu (0,005 – 40 µm)



PACKAGING

+REF DRM/G/435297 2x2g-şırınga +10 uç

ENDİKASYONLAR

•Sınıf I boşluklarında 4 mm'ye kadar katman kalınlıklarına sahip dolgular
•Sınıf II boşluklarında 4 mm'ye kadar katman kalınlıklarına sahip taban dolguları/astarları. Sınıf II boşluklardaki aşağıdaki katmanlar için yalnızca sınıf II boşluklarını doldurmaya uygun kompozitler kullanın.
• Boşluk astarı – Black'in sınıf I ve II boşluklarında birinci (alt) katman olarak

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Kaiser Flowable Composite

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

TANIM

Kaiser Flow Viscous, yüksek viskoziteli, ışıkla kürlenen, akışkan, yüksek radyoopak (%210 Al) bir kompozittir. DIN EN ISO 4049'un yönergeleri ve gereklilikleri geçerlidir.
Kaiser Flow Viscous Composite, şırıngalarda ve kompüllerde mevcuttur. Kompleler yalnızca tek kullanımlıktır.
Lütfen bunları tekrar kullanmayın, çünkü bu, kontaminasyon ve mikrop oluşumunu ortadan kaldırmayı imkansız hale getirir.

İÇERİK

Cam tozu, diüretan dimetakrilat, tetrametilen dimetakrilat, silisyum dioksit
Toplam dolgu: %77 ağırlıkça (%57 hacimce)
anorganik dolgu (0,005–40 µm)



PACKAGING

+REF **DRM/G/435298** 2x2g-syringe +10 cannulas A1
+REF **DRM/G/435299** 2x2g-syringe +10 cannulas A2
+REF **DRM/G/435300** 2x2g-syringe +10 cannulas A3

ENDİKASYONLAR

•Çatlak kapatma
•Azı ve küçük azı dişlerinde kapsamlı çatlak kapatma
•Black'in V. sınıfındaki dolgular (servikal çürükler, kök erozyonları, v şeklinde lezyonlar)
•Black'in I, II ve III. sınıflarındaki minimal invaziv dolgular
•Mine kusurlarının düzeltilmesi
•Alt oyukların kapatılması
•Minenin şekli ve renginde küçük düzeltmeler

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

Kaiser Flowable Composite Pink Light

TANIM

Kaiser Flow Viscous, yüksek viskoziteli, ışıkla kürlenen, akışkan, yüksek radyoopak (%210 Al) bir kompozittir. DIN EN ISO 4049'un yönergeleri ve gereklilikleri geçerlidir.
Kaiser Flow Viscous Composite, şırıngalarda ve kompüllerde mevcuttur. Kompleler yalnızca tek kullanımlıktır.
Lütfen bunları tekrar kullanmayın, çünkü bu, kontaminasyon ve mikrop oluşumunu ortadan kaldırmayı imkansız hale getirir.

İÇERİK

Cam tozu, diüretan dimetakrilat, tetrametilen dimetakrilat, silisyum dioksit
Toplam dolgu: %77 ağırlıkça (%57 hacimce)
anorganik dolgu (0,005–40 µm)



PACKAGING

+REF **DRM/G/435301** 2x2g-syringe +10 cannulas

ENDİKASYONLAR

•Çatlak kapatma
•Azı ve küçük azı dişlerinde kapsamlı çatlak kapatma
•Black'in V. sınıfındaki dolgular (servikal çürükler, kök erozyonları, v şeklinde lezyonlar)
•Black'in I, II ve III. sınıflarındaki minimal invaziv dolgular
•Mine kusurlarının düzeltilmesi
•Alt oyukların kapatılması
•Minenin şekli ve renginde küçük düzeltmeler

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

Kaiser Flowable Composite Pink Medium

TANIM

Kaiser Flow Viscous, yüksek viskoziteli, ışıkla kürlenen, akışkan, yüksek radyoopak (%210 Al) bir kompozittir. DIN EN ISO 4049'un yönergeleri ve gereklilikleri geçerlidir.
Kaiser Flow Viscous Composite, şırıngalarda ve kompüllerde mevcuttur. Kompleler yalnızca tek kullanımlıktır.
Lütfen bunları tekrar kullanmayın, çünkü bu, kontaminasyon ve mikrop oluşumunu ortadan kaldırmayı imkansız hale getirir.

İÇERİK

Cam tozu, diüretan dimetakrilat, tetrametilen dimetakrilat, silisyum dioksit
Toplam dolgu: %77 ağırlıkça (%57 hacimce)
anorganik dolgu (0,005–40 µm)



PACKAGING

+REF **DRM/G/435302** 2x2g-syringe +10 cannulas

ENDİKASYONLAR

•Çatlak kapatma
•Azı ve küçük azı dişlerinde kapsamlı çatlak kapatma
•Black'in V. sınıfındaki dolgular (servikal çürükler, kök erozyonları, v şeklinde lezyonlar)
•Black'in I, II ve III. sınıflarındaki minimal invaziv dolgular
•Mine kusurlarının düzeltilmesi
•Alt oyukların kapatılması
•Minenin şekli ve renginde küçük düzeltmeler

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

Kaiser Nano Composite

TANIM

Kaiser Nano Composite, yapıştırıcı dolgu tekniği için ışıkla kürlenen bir nano kompozittir. Ultra ince, radyoopak bir cam dolgu maddesi içerir. Ultra ince dolgu maddesi içeren bileşim, son derece homojen restorasyonlara yol açar. Rengin optimum şekilde adapte olması, optimum şekilde ayarlanmış bir bukalemun etkisinin sonucudur. DIN EN ISO 4049'un yönergeleri ve gereklilikleri geçerlidir. Kaiser Nano Composite, şırıngalarda ve kompullerde mevcuttur. Kompuller yalnızca tek kullanımlıktır. Lütfen bunları tekrar kullanmayın, çünkü bu, kontaminasyonu ve mikrop oluşumunu elemeyi imkansız hale getirir.

İÇERİK

Cam tozu, silisyum dioksit, diüretan dimetakrilat, Bis-GMA, tetra-metilen dimetakrilat, prepolimer

Dolgu içeriği ağırlıkça %83,5 (hacimce %66,5)
Anorganik dolgu (28nm–40 µm)



PACKAGING

+REF	**DRM/G/435306**	4g syringe A1
+REF	**DRM/G/435307**	4g syringe A2
+REF	**DRM/G/435308**	4g syringe A3
+REF	**DRM/G/435309**	Compules 20 x0.3g A1
+REF	**DRM/G/435310**	Compules 20 x0.3g A2
+REF	**DRM/G/435311**	Compules 20 x0.3g A3

ENDİKASYONLAR

- Black'in I, II, III, IV ve V sınıflarında doğrudan ön ve arka diş restorasyonları
- İnleyler, onleyler ve kaplamalar
- Azı dişleri ve küçük azı dişlerinde genişletilmiş fissür sızdırmazlığı
- Kütüklerin oluşturulması
- Gevşemiş dişlerin atellenmesi
- Estetiği artırmak için şekil ve renk düzeltmeleri

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

Nord Dual Curing Core Cement

TANIM

Nord CORE, diş yüzeyine güçlü yapışma ve uzun ömürlü restorasyon sağlayan çift kürlemeli, biyoinert, radyoopak, son derece estetik bir malzemedir. Nord CORE otomatik olarak karıştırılır.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- Çift Kürleme: Hafif ve kimyasal
- Eğilme Dayanımı: 92,3±4,8 MPa
- Su Emme: 18,49±0,15 µg/mm3
- Su Çözünürlüğü: 0,75±0,26 µg/mm3

İÇERİK

Baz: silika ve baryum bazlı öğütülmüş diş camı 50-70%, metakrilat karışımı %30-50, silisyum dioksit %1-5, başlatıcı <%1, opaklaştırıcı <%1, inhibitör <%1. Katalizör: silika ve baryum bazlı öğütülmüş diş camı 50-70%, metakrilat karışımı %30-50, silisyum dioksit %1-5, ko-başlatıcı <%1, stabilizatör <%1, fotobaşlatıcı <%1, opaklaştırıcı <%1, inhibitör <%1, pigment <%1. Nord CORE, insan kanı veya plazma türevi; insan kökenli dokular veya hücreler veya bunların türevleri; (AB) No. 722/2012 Yönetmeliğinde belirtilen hayvan kökenli dokular veya hücreler veya bunların türevleri dahil olmak üzere tıbbi madde içermez; kanserojen, mutajen, üremeye toksik veya endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler.

AMAÇ VE KLİNİK FAYDALAR

Nord CORE, restore edilebilir dişin estetik görünümünü geri kazandırır/iyileştirir; restore edilebilir dişin diş fonksiyonunu geri kazandırır/korur; silika ve baryum bazlı öğütülmüş restore edilebilir diş camının 50 diş ve bitişik dokulardaki biyolojik yapılarını korur.



Light Curing
Deep Of Cure
Flexural Strength
Water Sorption
Water Solubility

PACKAGING

+REF **NRDCOR1**	9g double syringe, 10pcs automix tips, 10pcs intraoral-root canal tips, 10psc endo tips

KLİNİK ENDİKASYONLAR

Çekirdek yapımı ve post simantasyon için.

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

Nord LC Adhesive 5ml

TANIM

Nord BONDING LC, 5. nesil ışıkla kürlenen, biyoinert, tek bileşenli tek adımlı yapıştırıcıdır ve ıslak yapıştırma tekniğiyle kullanıma uygundur. Yüzeylerin aşındırılması gerekir.

İÇERİK

Metakrilat karışımı %55-95, aseton %10-30, saç kremi 1-10%, ko-başlatıcı <%5, hızlandırıcı <%1, inhibitör <%1,fotobaşlatıcı <%1. Nord BONDING LC şunları içermez: insan kanı veya plazması türevi dahil tıbbi madde; insan kökenli dokular veya hücreler veya bunların türevleri; hayvan kökenli dokular veya hücreler veya bunların türevleri, (AB) No. 722/2012 Yönetmeliğinde belirtildiği gibi; kanserojen, mutajenik, üremeye toksik olan veya endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler


PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- Light Curing : 20s
- Shear Bond Strength (Enamel) : 21.8±2.4 MPa

AMAÇ VE KLİNİK FAYDALAR

Nord BONDING LC, restore edilebilir dişin estetik görünümünün iyileştirilmesine/geri kazandırılmasına yardımcı olur; restore edilebilir dişin diş fonksiyonunun geri kazandırılmasına/korunmasına yardımcı olur; restore edilebilir dişin biyolojik yapılarının ve bitişik dokuların korunmasına yardımcı olur.



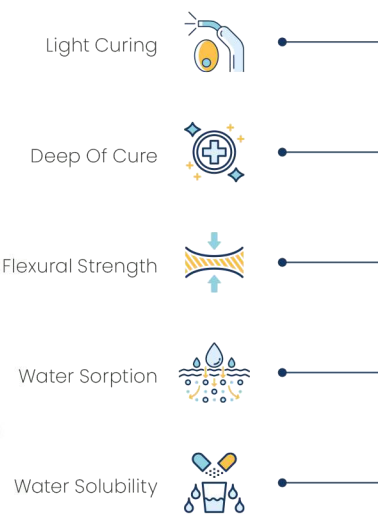

PACKAGING

+REF **NRDBLTP** 5ml bottle, 5pcs micro applicators, cup

KLİNİK ENDİKASYONLAR

Dentin ve mineyi polimer bazlı restoratif materyallere, kompomerlere, seramik yüzeylere bağlamak için kullanılır ve restorasyonun tutunmasını iyileştirir

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Nord LC
Compomer Liner

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

TANIM

Nord LINER, poliasit modifiye kompozit reçineler ve cam iyonomer dolgu maddesine dayalı, ışıkla kürlenen, biyoinert, radyoopak kompomer astardır. Bu tür bir bileşim, kompomerin genleşmesinin kompozit malzemelerin kürlenme büzülmesini kısmen telafi etmesine olanak tanır. Cam iyonomer içeriği sayesinde, kompomer dentine yapışmayı iki katına çıkarır. Nord LINER, çatlak oluşumlarını önler, mikro kırıkları ve ikincil çürükleri en aza indirir. Malzeme hem normal bir astar olarak (boşluğun tabanını kaplamak) hem de tüm boşluğu kaplamak için (gerilim kırma işlevi) kullanılabilir.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

•Işıkla Kürleme: 20s
•Kürlenme Derinliği: 2,51±0,11 mm
•Eğilme Dayanımı: 34,3±2,8 MPa

İÇERİK

Diş camı reaktifi %50-70, metakrilat karışımı %20-30, değiştirici madde %1-5, fotobaşlatıcı <%1, kobaşlatıcı <%1, opaklaştırıcı <%1, stabilizatör <%1, inhibitör <%1.
Nord LINER, insan kanı veya plazma türevi; insan kökenli dokular veya hücreler veya bunların türevleri; hayvan kökenli dokular veya hücreler veya bunların türevleri, (AB) No. 722/2012 Yönetmeliğinde belirtildiği gibi; kanserojen, mutajenik, üremeye toksik veya endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler dahil olmak üzere tıbbi madde içermez.

ENDİKASYONLAR

•Sınıf I, II, III, IV ve V boşluklarının doğrudan restorasyonları için;
•İnleyler, onleyler ve laminat kaplamalar gibi dolaylı restorasyonlar için;
•Molar ve premolarlarda genişletilmiş fissür sızdırmazlığı için;
•Korular için.





PACKAGING

+REF **NRDLIKP**	2.5g syringe, 5 tips
+REF **NRDLIK1**	4x2.5g syringes, 20 tips

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

Nord LC Nano Hybrid Composite

TANIM

Nord NANO, yüksek estetik, mükemmel cilalanabilirlik, renk kararlılığı, yüksek mukavemet ve aşınma direncine sahip Vita* tonlarında ışıkla kürlenen, biyoinert, radyoopak nano hibrit kompozittir

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- Light Curing : 20s
- Depth Of Cure : 2.50±0.03 mm
- Flexural Strength : 119.2±6.6 MPa
- Water Sorption : 17.99±0.32 µg/mm³
- Water Solubility : 0.68±0.24 µg/mm³

KOMPOZİSYON

Diş camı öğütülmüş %70-80, metakrilat karışımı %25-35, silisyum dioksit %1-5, ko-başlatıcı <%1, fotobaşlatıcı <%1, stabilizatör <%1, inhibitör <%1, opaklaştırıcı <%1, pigment <%1.
Nord NANO, insan kanı veya plazma türevi; insan kökenli dokular veya hücreler veya bunların türevleri; hayvan kökenli dokular veya hücreler veya bunların türevleri, (AB) No. 722/2012 Yönetmeliğinde belirtilenler dahil olmak üzere tıbbi madde içermez; kanserojen, mutajenik, üremeye toksik veya endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler

KLİNİK ENDİKASYONLAR

•Sınıf I, II, III, IV ve V boşluklarının doğrudan restorasyonları için;
•İnleyler, onleyler ve laminate veneerler gibi dolaylı restorasyonlar için;
•Molar ve premolarlarda genişletilmiş fissür sızdırmazlığı için;
•Korular için.





PACKAGING

+REF **NRDXTA1**	4g syringe, dentin shade A1
+REF **NRDXTA2**	4g syringe, dentin shade A2
+REF **NRDXTA3**	4g syringe, dentin shade A3
+REF **NRDXTA35**	4g syringe, dentin shade A3.5
+REF **NRDXTB2**	4g syringe, dentin shade B2
+REF **NRDXTC2**	4g syringe, dentin shade C2
+REF **NRDXTO2**	4g syringe, dentin shade OA2
+REF **NRDXTO3**	4g syringe, dentin shade OA3
+REF **NRDXTEU**	4g syringe, enamel shade universal
+REF **NRDXTK1**	4x4g syringes (A1, A2, A3, A3.5), 5ml light curing adhesive Nord BONDING LC,4.3 g etching gel Nord GEL, consumables
+REF **NRDXTK2**	8x4g syringes (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3), 5ml light curing adhesive Nord BONDING LC, 4.3g etching gel Nord GEL, consumables
+REF **NRDXTK1SE**	4x4g syringes (A1, A2, A3, A3.5), 5ml light curing selfetching universal adhesive Nord BONDING SE Universal, 4.3g etching gel Nord GEL, consumables
+REF **NRDXTK2SE**	8x4g syringes (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3), 5ml light curing self-etching universal adhesive Nord BONDING SE Universal, 4.3g etching gel Nord GEL, consumables

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

Nord Pak

TANIM

Nord Pak, %100 pamuktan yapılmış, uzun birbirine geçen zincirler oluşturan binlerce küçük ilmek halinde örülmüş steril olmayan bir kordondur. Nord Pak 4 boyutta mevcuttur: #1,#0,#00,#000. İşaretleme kordonun kalınlığına bağlıdır. Bu kordonun benzersiz bir özelliği elmas frezeye dolanmamasıdır.

KLİNİK ENDİKASYONLAR

#1 ön dişlerin hazırlanması için;
#00 ön dişler için; iki kordonlu teknik için üst kordon olarak
#00 kaplamaların hazırlanması ve simantasyonu sırasında;
ince, kırılgan dokularla ilgili restoratif prosedürler
#000 alt ön dişler için, gingival ve subgingival kaplamaların yakınında yapıştırma yaparken; sınıf III, IV V restorasyonlar; iki kordonlu teknik için birinci kordon

AMAÇ VE KLİNİK FAYDALAR

Nord Pak, diş eti çekilmeleri için diş prosedürleri sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



PACKAGING

+REF **NRDPU11**	Knitted retraction cord #1 (244cm), medium thick, blue
+REF **NRDPU01**	Knitted retraction cord #0 (244cm), medium, lilac
+REF **NRDPU02**	Knitted retraction cord #00 (244cm), thin, zellow
+REF **NRDPU03**	Knitted retraction cord #000 (244cm), ultra-thin, black

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

Nord Phosphoric Acid Etching Gel

DESCRIPTION

Nord GEL is 37% thixotropic phosphoric acid gel with optimum level of viscosity. Syringe presentation with special tips allows placement of the etching gel in any desired location.

COMPOSITION

Diluent 40-60%, phosphoric acid 37%, silicon dioxide 10-20%, thickener 5-10%, pigment <1%.
Nord GEL does not contain medicinal substance, including human blood or plasma derivate; tissues or cells, or their derivates, of human origin; tissues or cells of animal origin, or their derivates, as referred to in Regulation (EU) No. 722/2012; substances which are carcinogenic, mutagenic, toxic to reproduction or having endocrine disrupting properties.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- pH : <1

INTENDED PURPOSE AND CLINICAL BENEFITS

Nord GEL is intended to be used for tooth surface preparation procedures.

TANIM

Nord GEL, optimum viskozite seviyesine sahip %37 tiksotropik fosforik asit jelidir. Özel uçlu şırınga sunumu, aşındırma jelinin istenilen herhangi bir yere yerleştirilmesini sağlar.

KOMPOZISYON

Seyreltici %40-60, fosforik asit %37, silisyum dioksit %10-20, koyulaştırıcı %5-10, pigment <%1.
Nord GEL, insan kanı veya plazma türevi; insan kökenli dokular veya hücreler veya bunların türevleri; hayvan kökenli dokular veya hücreler veya bunların türevleri, (AB) No. 722/2012 Yönetmeliğinde belirtildiği gibi; kanserojen, mutajenik, üremeye toksik veya endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler dahil olmak üzere tıbbi madde içermez.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- pH : <1



CLINICAL INDICATIONS

Tooth enamel and / or dentin etching.

KLİNİK ENDİKASYONLAR

Diş minesi ve/veya dentin aşındırması.

PACKAGING

+REF **NRDGECP** 4.3g syringe, 5 tips
+REF **NRDGEM1** 4x1.2ml syringes, 10 tips

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

Nord Sealant

DESCRIPTION

Nord Seal is white, bioinert, opaque, light curing, highly flowable sealant especially suitable for sealing small pits and fissures.

TANIM

Nord Seal, özellikle küçük çukurların ve çatlakların kapatılması için uygun, beyaz, biyoetkisiz, opak, ışıkla kürlenen, yüksek akışkanlığa sahip bir sızdırmazlık malzemesidir.

INTENDED PURPOSE AND CLINICAL BENEFITS

Nord Seal improves aesthetic appearance; maintains dental function;protects biological structures.

AMAÇ VE KLİNİK FAYDALAR

Nord Seal estetik görünümü iyileştirir; diş fonksiyonunu korur; biyolojik yapıları korur.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

• Light Curing	: 20s
• Depth Of Cure	: 3.79 ± 0-7mm

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

•Light Curring	: 20s
•Kür Derindiği	: 3.79 ± 0-7mm

CLINICAL INDICATIONS

- For sealing small pits and fissures

KLİNİK ENDİKASYONLAR

•Küçük çukur ve çatlakları kapatmak için



PACKAGING

+REF **NRDSEKP**	3.8g syringe,3 tips
+REF **NRDSEM1**	4x1.2ml syringes,10 tips
+REF **NRDSEK1**	4x3.8g syringes, 12 tips

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Nord Tooth Surface Polishing Paste

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

TANIM

Nord FASTE, profesyonel olarak uygulanan diş profilaksisi tedavisi sırasında diş temizliği ve parlatma için kullanılan yağsız profilaksi macunudur.

İÇERİK

Kalınlaştırıcılar %30-50, dolgu maddeleri %10-50, çözücü %5-15, aroma 1-5%, yardımcı maddeler <%3, pigment <%1.
Nord FASTE, tıbbi madde içermez, insan kanı veya plazma türevi; insan kökenli dokular veya hücreler veya bunların türevleri; hayvan kökenli dokular veya hücreler veya bunların türevleri,
(AB) No. 722/2012 Yönetmeliğinde belirtildiği gibi; kanserojen, mutajenik, üremeye toksik veya endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşındırıcılık:	kalın/orta/ince

AMAÇ VE KLİNİK FAYDALAR

Nord FASTE estetik görünümü iyileştirir; diş fonksiyonunu korur; biyolojik yapıları korur.



PACKAGING

+REF **NRDFCD1**	100x2g single dose cups coarse, peppermint
+REF **NRDFMD1**	100x2g single dose cups medium, orange
+REF **NRDFFD1**	100x2g single dose cups fine, apple

KLİNİK ENDİKASYONLAR

•Dişlerden döküntüleri, plakları, tartarları, lekeleri ve diğer birikimleri temizlemek için;
•Restorasyonlar ve florür tedavisinden önce diş yüzeyinin hazırlanması (temizlik ve cilalama) için;
•Restorasyondan sonra normal konturları, pürüzsüz kenarları geri kazandırmak için yüzeyi yeniden şekillendirmek, bitirmek ve cilalamak için ve restorasyonun kendisinin genel görünümü ve uzun ömürlülüğü için yüksek parlaklıkta bir parlaklık yaratmak için. Diş yüzeyinin durumu ve klinik durumu değerlendirildikten sonra diş hekimi, mevcut birkaç tane sertlik seviyesinden birini seçebilir - ince (cilalama), orta (cilalama ve temizleme) ve kaba (temizleme).

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

Rhein Micro Hybrid Composite

TANIM

Rhein Micro Hybrid Composite, ultra ince, radyoopak bir cam dolgu maddesi içeren, ışıkla kürlenen, hibrit silikon dioksit, kompozittir ve yapıştırıcı teknikler kullanılarak dolguların yerleştirilmesi için endikedir. Yüksek parlaklıkta cilalanabilir. Ultra ince parçacık dolgu maddesi sayesinde, kolayca yüksek parlaklıkta cilalanabilen son derece homojen restorasyonlar yerleştirilebilir. Bukalemun etkisi, dolgunun gölgesini diş yapısıyla mükemmel bir şekilde eşleştirir. EN ISO 4049 yönergelerine uyulmuştur.
Rhein Micro Hybrid Composite, şırıngalarda ve kompozelerde mevcuttur. Kompozisyonlar tek kullanımlıktır. Lütfen bunları tekrar kullanmayın, çünkü bu, kontaminasyonu ve mikrop oluşumunu ortadan kaldırmayı imkansız hale getirir.

İÇERİK

Cam tozu, diüretan dimetakrilat, silisyum dioksit, Bis-GMA, tetra-metilen dimetakrilat.
Toplam dolgu: %75 ağırlıkça (%53 hacimce) anorganik dolgu (0,005–3.0 µm)



PACKAGING

+REF **DRM/G/435303** 4g syringe A1
+REF **DRM/G/435304** 4g syringe A2
+REF **DRM/G/435305** 4g syringe A3

ENDİKASYONLAR

• Black'in I, II, III, IV ve V. sınıf boşluklarında doğrudan ön ve arka restorasyonlar.
• İnleyler, onleyler ve laminat kaplamalar
• Azı dişlerinde ve küçük azı dişlerinde genişletilmiş fissür sızdırmazlığı
• Kütük oluşturma
• Gevşek dişlerin atellenmesi
• Estetiği iyileştirmek için konturların ve renk tonlarının ayarlanması

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

Adler Selective Etch Bond

TANIM

Adler Seçici Etch Bond, dolgu kompozitlerinin doğal diş minesine güvenli ve güvenilir bir şekilde bağlanmasını sağlayan tek bileşenli, kendiliğinden aşındırmalı, ışıkla kürlenen bir diş yapıştırıcısıdır. Yapıştırıcı hem kendiliğinden aşındırmalı hem de seçmeli aşındırma tekniklerinde kullanılabilir.
•Adler Seçici Etch Bond, tüm geleneksel ışıkla kürlenen kompozit film malzemeleriyle uyumludur.

İÇERİK

Fosfat esteri, karboksilik asit esteri, metakrilat, foto-başlatıcılar, su, etanol, füme silika.

ENDİKASYONLAR

•Doğal dişlere doğrudan, ışıkla kürlenen kompozit restorasyonlar.
•Kompozit ve seramikten (inleyler, onleyler, kaplamalar, kronlar) ışıkla kürlenen ve çift kürlenen yapıştırıcı kompozitlerle (örneğin Terra Root Cem Viscous) yapılan dolaylı restorasyonlar.
•Kırık kompozit dolguların onarımı.





PACKAGING

+REF **DRM/G/433930** 5ml-Şişe

KONTRENDİKASYONLAR

•Açıkta kalan pulpa dokusuyla temas ettirmeyin.
•Yetersiz aydınlatma varsa kullanmayın (örn. kök kanal postlarını sabitlerken).

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Terra Root Cem Viscous

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

TANIM

Terra Root Cem Viscous, çift kürlemeli bir sabitleme kompozitidir. Floresan ve radyoopak.

İÇERİK

Cam tozu, diüretan dimetakrilat, prepolimer, tetrametilen dimetakrilat, silikon dioksit, dibenzoil peroksit

ENDİKASYONLAR

•Laminalar, inleyler, onleyler, kronlar ve köprüler gibi dolaylı restorasyonların yapıştırıcılarla sabitlenmesi. Malzeme, cam seramik, zirkonyum dioksit, kompozit, zirkonyumla güçlendirilmiş kompozit, yüksek değerli metal, değerli olmayan metal, titanyumdan yapılmış restorasyonların sabitlenmesi için uygundur.
•Kök pimlerinin yapıştırıcıyla sabitlenmesi
•Kütüklerin oluşturulması (çekirdek oluşturma malzemesi olarak)

LIGHT POLİMERİZASYON

- Light Intesity : >500mW/cm²
- Optical Wavelength Range : 350-500nm
- Exposure Time Per Surface : 20 Sec

KARIŞIM ORANI

Automix kartuşu ve karıştırma ucuyla Terra Root Cem Viscous her zaman 1:1'lik optimum karıştırma oranında mevcuttur



PACKAGING

+REF **DRM/G/435312** 2 x 4 g + 10 cannules

FİLTRE İÇERİĞİ

Ağırlıkça %75 inorganik dolgu maddesi (0,005- 5,0 µm)

DR.MÜLLER®
DENTAL PRODUCTS

Total Etching Gel

Denta Solaris A.Ş.
innovative dentistry solutions

AMAÇ

Diş aşındırma jeli, mine ve/veya dentini aşındırmak için kullanılır.

TANIM

Toplam aşındırma jeli, sonraki tedavi için diş yüzeyinde mikro tutuklamalar oluşturmak için kullanılan bir diş aşındırma jelidir. Toplam Aşındırma Jelinin renklendirici özelliği ve stabil jel kıvamı sayesinde uygulama basit ve kontrolü kolaydır.

HASTA HEDEF GRUBU

Total Etching Jel, ileri dental veya ortodontik tedavi için diş yüzeylerinde mikroretansiyon oluşturulacak tüm hastalarda kullanılır.



PACKAGING

+REF **DRM/G/435313** 2ml-syringe + 20 cannules

RECOMMENDED REACTION TIMES

• Normal Enamel	: 30 Seconds
• Immature Enamel	: 20-30 Seconds
• Fluoridated Teeth	: 90-120 Secondes
• Deciduous Teeth	: 90-120 Secondes
• Dentin	: 15 Secondes